


家庭用 フットマッサージャー
フットサロン EP1510

添付文書
取扱説明書

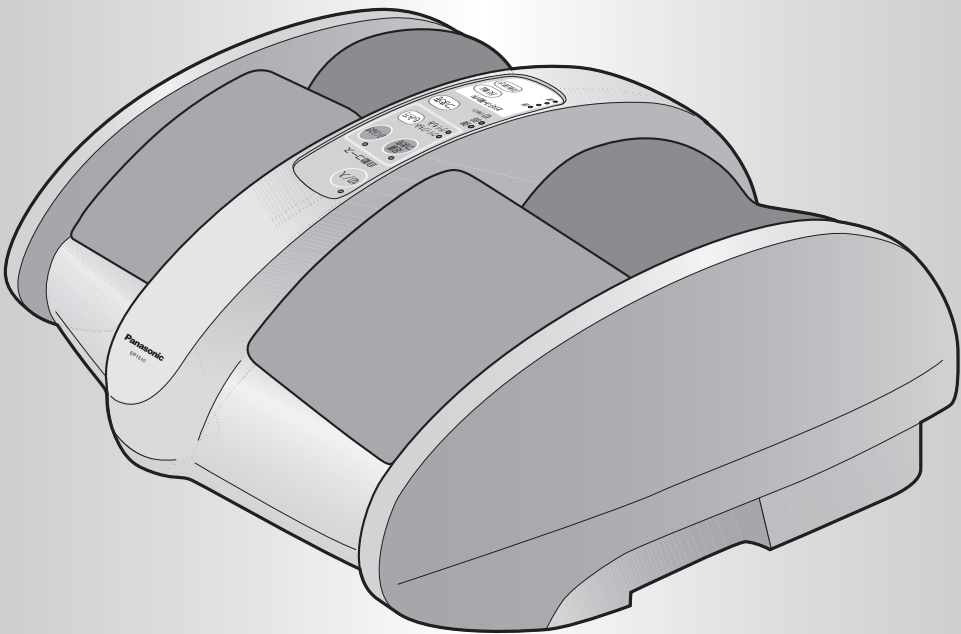

効能・効果

あんま・マッサージの代用

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



Panasonic

持込修理

フットサロン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EP1510
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、付属品は除く)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お 客 様	ご住所 お名前 様 電 話 () -
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は「分解禁止」)



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」です)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



必ず守る

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
(1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
(2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
(3) 心臓に障害のある人
(4) 妊娠中や出産直後の人
(5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
(6) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
(7) 施療部位に創傷のある人
(8) 体温38℃以上(有熱期)の人
(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき)
(9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
(10) 脚部に重度の血行障害のある人
(11) 椎間板ヘルニア症の人
(12) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災や感電のおそれがあります。








禁止

- 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
症状を悪化させるおそれがあります。
- 布団やコタツの中またはホットカーベットの土及び暖房器具の近くでは使用しない。
火災や感電のおそれがあります。
- 足またはふくらはぎのマッサージ以外の目的では使用しない。
事故やけがのおそれがあります。
- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。
事故やけがのおそれがあります。
- 本体の上に立って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。
- 本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。
(直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。)
けがや感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。
火災や感電のおそれがあります。
- 変圧器を用いた使用はしない。
火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火、故障のおそれがあります。
- 自分で意志表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがの原因になります。



分解禁止

- 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意	
 必ず守る	●使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良の原因になります。
	●マッサージは1回15分以内にする。 守らないと逆効果やけがの原因になります。
	●動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。 守らないと感電や発火の原因になります。
	●持ち運ぶときは、両手で持って運ぶ。 守らないと落下による故障やけがの原因になります。
	●本体を立てて保管しない。 守らないと本体が倒れて故障やけがの原因になります。
 禁止	●足、ふくらはぎ以外には使用しない。 けがの原因となります。
	●電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分を付着させない。 感電やショート、発火、故障の原因になります。
	●つま先部を持って本体を持ち運ばない。 落下してけがの原因になります。
	●つま先部の上にのらない。 破損してけがや故障の原因になります。
	●他の治療器と同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。
 水場使用禁止	●浴室など湿気の多い場所で使わない。 感電や故障の原因になります。
 水ぬれ禁止	●本体には水などをこぼさない。 感電やショート、故障の原因になります。
 電源プラグを抜く	●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 感電ややけどのおそれがあります。
	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。 感電やショート、発火の原因になります。

もくじ

ご使用前に

●安全上のご注意	1
●各部のなまえ	5
●準備	6

使いかた

●足裏・つま先をマッサージする	7
●ふくらはぎをマッサージする	10
●マッサージが終わったら	11

お手入れ・Q&A


●お手入れのしかた	12
●保管	12
●着脱カバーの取り付け方と外し方	13
●Q & A	14

お知らせ


●定格・仕様	15
●こんな異常を感じたら	16
●保証とアフターサービス	19

各部のなまえ

本 体

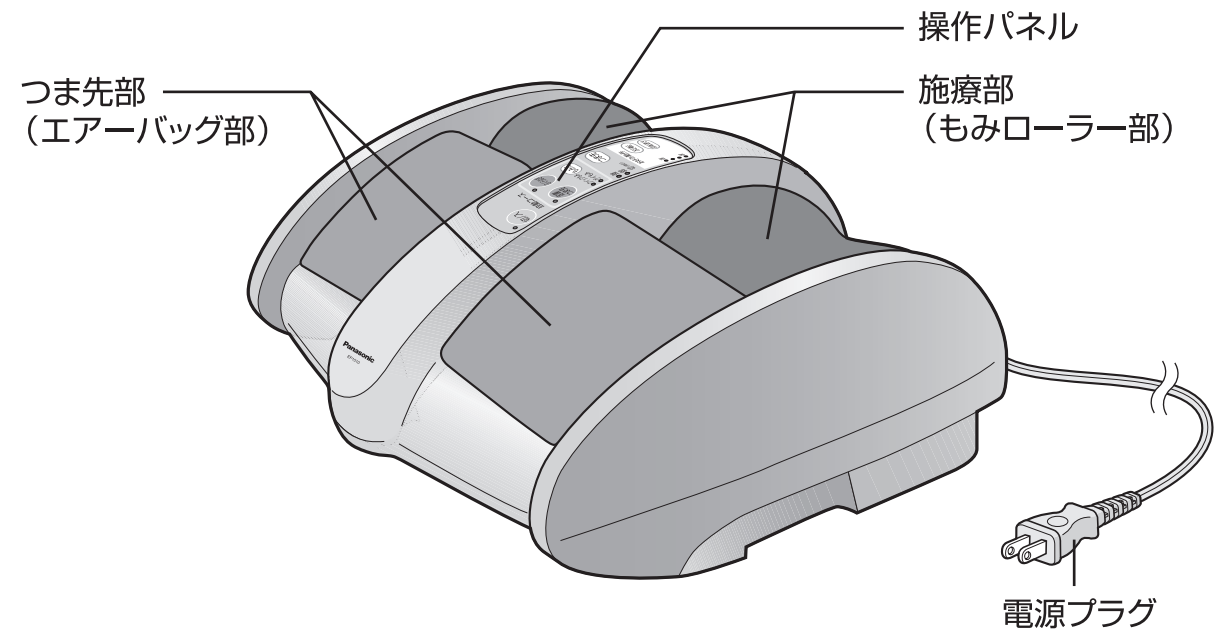


カバーについて

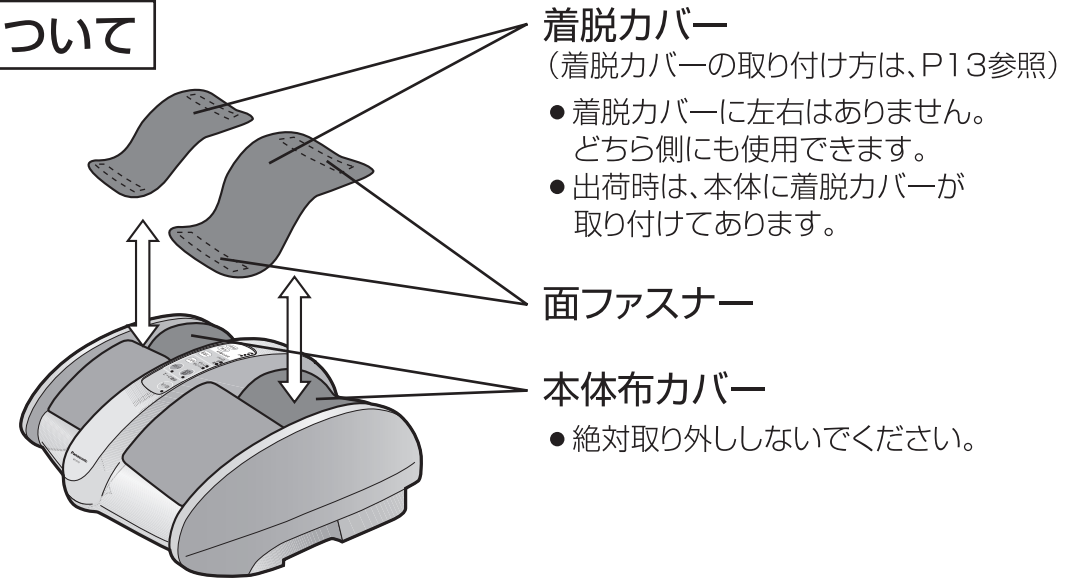

警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
 - (1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
 - (2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 (3) 心臓に障害のある人 (4) 妊娠中や出産直後の人
 - (5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - (6) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
 - (7) 施療部位に創傷のある人
 - (8) 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき)
 - (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき (10) 脚部に重度の血行障害のある人
 - (11) 椎間板ヘルニア症の人 (12) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

操作パネル

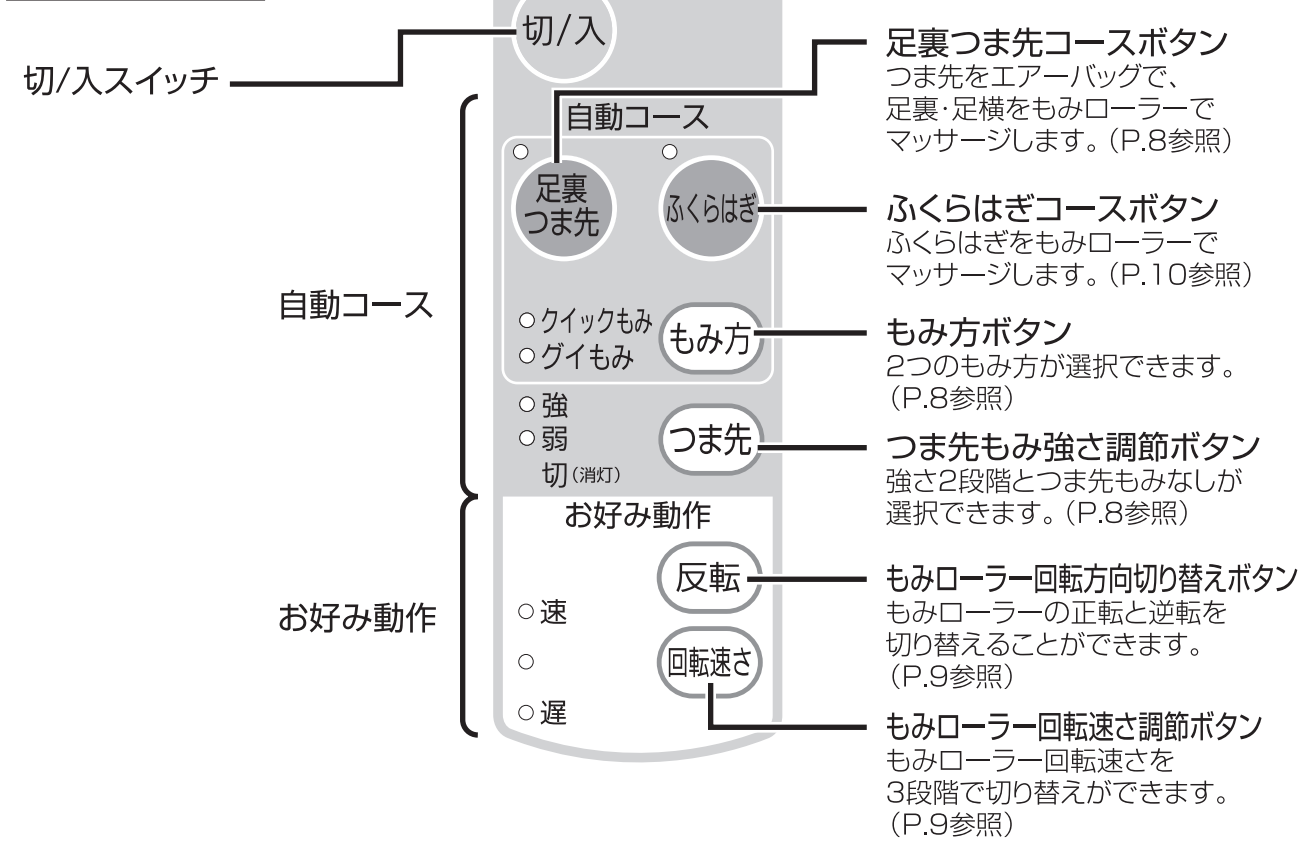


準備

電源プラグを差し込む(交流100Vのコンセント)

- 安定性のよい場所で使用する。

必ず着脱カバーを取り付けて使用してください。
(着脱カバーの取り付け方はP13参照)

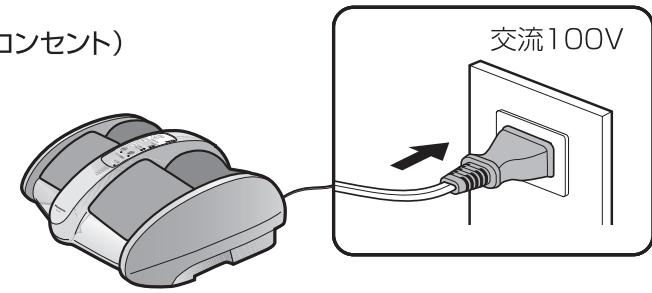

警告


- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと火災や感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火、故障のおそれがあります。
- 変圧器を用いた使用はしない。
火災や感電の原因になります。

お願い


- 本製品の近くで、携帯電話を使用しないでください。
誤動作のおそれがあります。

足裏・つま先をマッサージする

1 つま先をつま先部に入れて、土踏まずをもみローラーの中央に置く

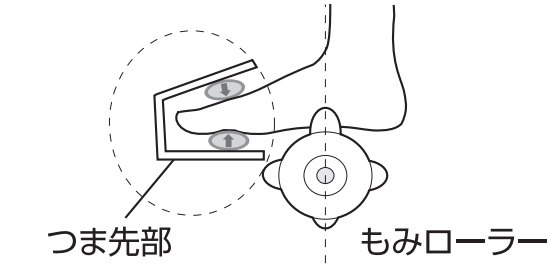

※適用足サイズ
21.0～28.0cm

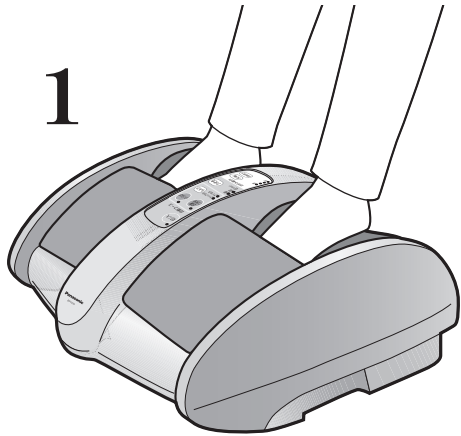

2 切/入 を押す

- 切/入表示ランプが点灯
自動コースの「足裏つま先コース」と「ふくらはぎコース」のランプが点滅

3 自動コースまたは、お好み動作の 回転速さ を選ぶ

- 選択された動作表示ランプが点灯します。

もみ回数

- 100V60Hz 速: 約180回/分
中: 約128回/分
遅: 約88回/分
- 100V50Hz 速: 約184回/分
中: 約136回/分
遅: 約100回/分

警告

- 足またはふくらはぎのマッサージ以外の目的では使用しない。
事故やけがのおそれがあります。
- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。
事故やけがのおそれがあります。
- 本体の上に立って使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。
- 本体布カバーや着脱カバーが破れた状態や内部構造が露出した状態、外れた状態では使用しない。
(直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き修理を依頼する。)
けがや感電の原因になります。
- 自分で意志表示ができない人に使わせない。
また、自分で操作できない人への使用はさせない。
事故やけがの原因になります。

2 切/入

3




自動コースを使用する場合

足裏
つま先

を押す


- つま先をエアバッグで、足裏・足横をもみローラーでマッサージします。

※もみ方は「クイックもみ」、つま先は「弱」で始まります。

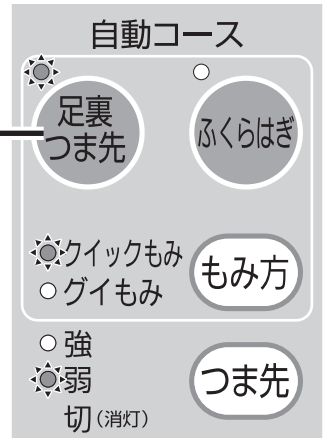

もみ方を変更したいとき もみ方 を押す

- 繰り返し押すともみ方を変更できます。

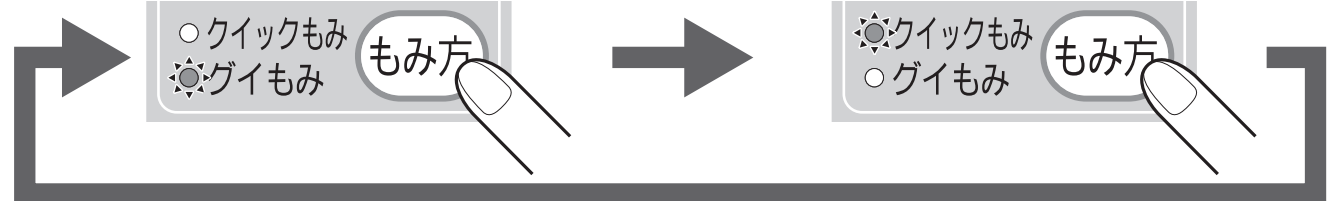

グイもみ

ゆるやかに速さを切り替え、じっくりともまれる刺激が味わえます。

クイックもみ

小刻みに速さを切り替え、ギュギュッとまれる刺激が味わえます。

つま先もみ強さを変更したい・切りたいとき つま先 を押す

- つま先もみ強さ調節ボタンを押すと強さが切り替わります。



- 表示ランプが消灯のときは、つま先もみは停止の状態です。
(再度押すつま先もみが始まります)
[つま先エア圧の強さ]

強: 約58kPa
弱: 約48kPa

お知らせ


※障害物にあたるなど、ご使用中無理に力がかかった場合、安全のため全てのランプが点滅して動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み電源を入れて操作してください。

足裏・つま先をマッサージする

お好み動作を使用する場合

回転速さを押す

- 一定の速さで足裏・足横をもみローラーでマッサージします。
- 好みの速さになるまで繰り返し押してください。
※3段階切り替わります。

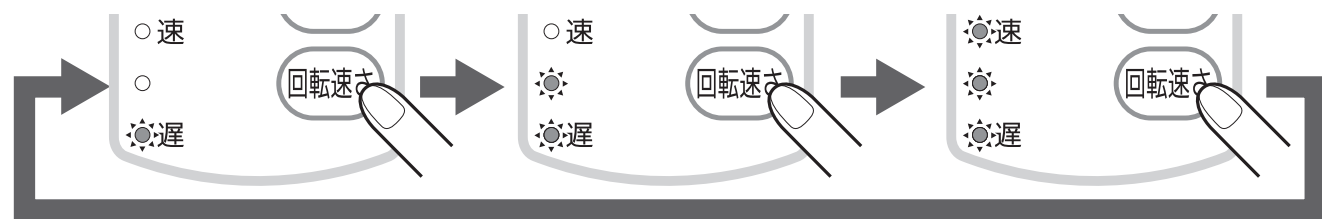

反転したいとき 反転を押す

- 一度押すともみローラーが逆転（かかとからつま先へ回る方向）します。
- もう一度押すと正転（つま先からかかとへ回る方向）します。

4 マッサージ終了後、自動的に停止
所定のプログラムが終了すると自動的に停止します。（約15分）


途中で終了したいときは

切/入を押す


- 全ての動作がその場で停止します。
- エアバッグの空気が抜けます。

＜このような使い方もできます＞


- 足の指のつけ根を伸ばしながらかかとをマッサージ

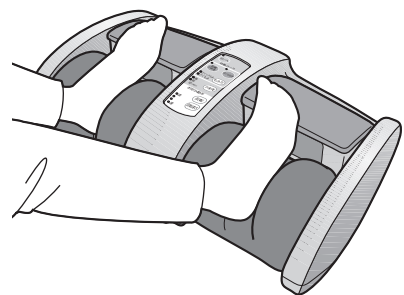

- もみローラーのみで足裏をマッサージ

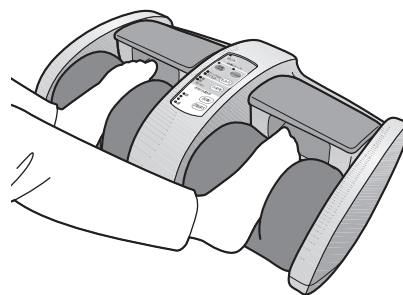

⚠ 注意

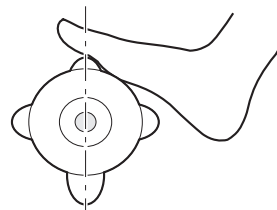


- もみローラー中央部より前側につま先を置いて足のマッサージをする。守らないとけがの原因になります。

ふくらはぎをマッサージする

1 本体の「つま先部」側からふくらはぎを置く

1

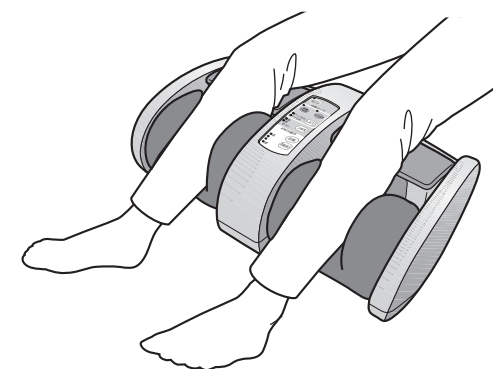

2 切/入を押す

- 切/入ボタンランプが点灯
自動コースの「足裏つま先コース」と「ふくらはぎコース」のランプが点滅

2

切/入

自動コース

足裏つま先

ふくらはぎ

クイックもみ
○グイもみ

もみ方


3

3 ふくらはぎを押す

- 「ふくらはぎコース」のランプが点灯
- もみ方は「クイックもみ」で始まります。

もみ方を変更したいとき もみ方を押す

- 繰り返し押すともみ方を変更できます。

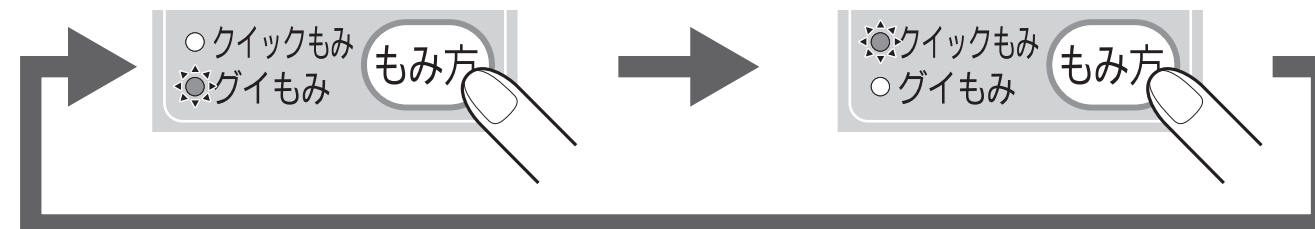

グイもみ

ゆるやかに速さを切り替え、じっくりともまれる刺激が味わえます。

クイックもみ

小刻みに速さを切り替え、ギュギュッとともまれる刺激が味わえます。

ふくらはぎをマッサージする

4 マッサージ終了後、自動的に停止
所定のプログラムが終了すると自動的に停止します。(約15分)


途中で終了したいときは

切/入 を押す

●全ての動作がその場で停止します。

マッサージが終わったら

電源プラグを抜く

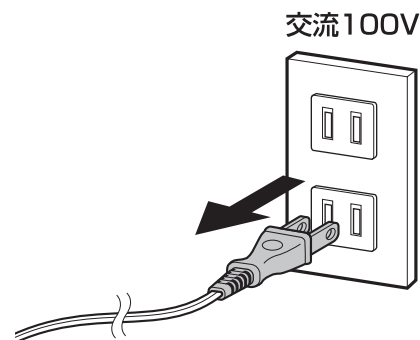


⚠ 注意

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って抜く。
感電やショート、発火の原因になります。

お手入れのしかた

本体(プラスチック部分)


1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。
 - シンナーやベンジン・アルコールは絶対に使用しない。
変色したり割れが発生するおそれがあります。

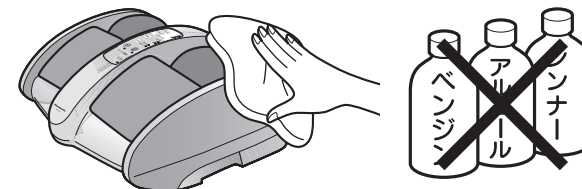

布地部分


着脱カバー

- 着脱カバーが汚れたら、取り外して洗濯してください。
 - 1. 本体から着脱カバーを外す。(P.13参照)
 - 2. 洗濯ネットに入れて中性洗剤を入れた洗濯機で洗います。
 - 3. 風通しの良いところで自然乾燥させて乾かしてください。
(乾燥機のご使用は避けください。)
- ※洗剤は蛍光増白剤の入っていない洗剤をお使いください。
生地が白く変色する場合があります。
※多少色落ちすることがありますので、他の物との洗濯は
お避けください。
※つけおき洗いはお避けください。

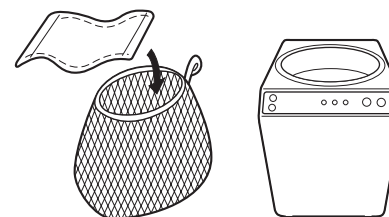

本体布カバー

1. 石けん液を含ませた布をよく絞ってからふく。
2. 仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。
3. 自然乾燥させる。

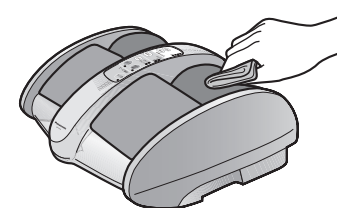


⚠ 注意


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない。
感電ややけどの原因になります。

保管

- 持ち運ぶときは両手で持って運んでください。
指かかりが下にあります。

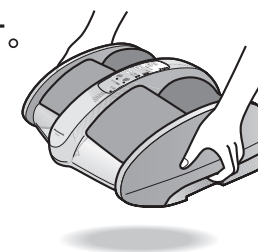

- 立てて保管しないでください。
本体の構造上、故障するおそれがあります。

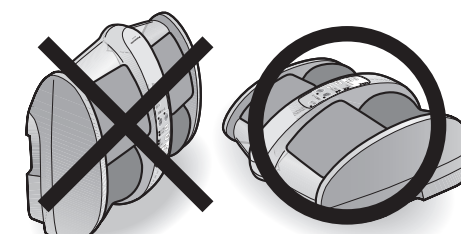


- 小さな子供の手の届くところに保管しない。

着脱カバーの取り付け方と外し方


- 出荷時は、本体に着脱カバーが取り付けられています。

取り付け方


1 つま先部を上にする

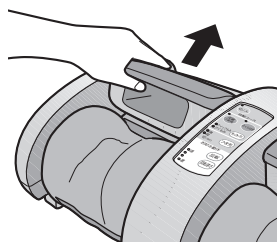

4 本体後部下の面ファスナーに貼り付ける

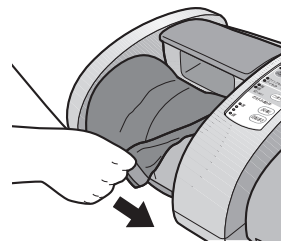


2 着脱カバーを面ファスナーに貼り付ける

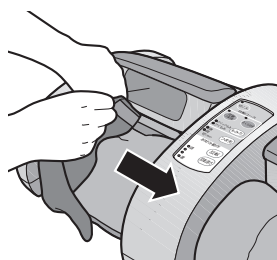


3 着脱カバーを手前に引っ張る

※両サイドの溝部に、しっかりと着脱カバーを入れこんでください。

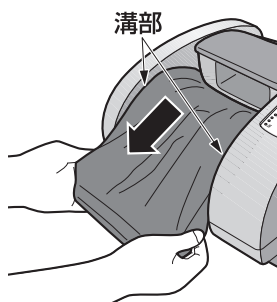


5 逆側も取り付ける

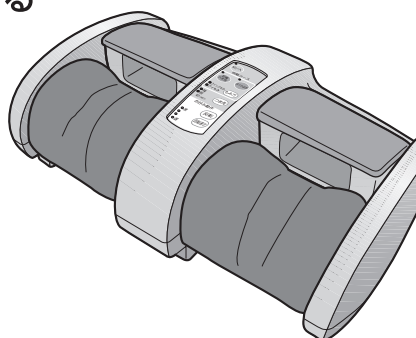


外し方


1 本体後部(手前)下の面ファスナーをはがす

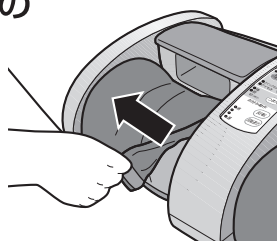


3 着脱カバーの面ファスナーをはがす

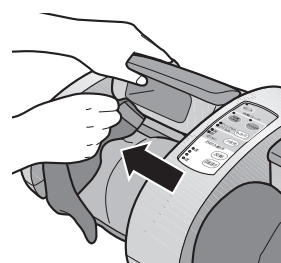

2 着脱カバーを持ちながらつま先部を上にする

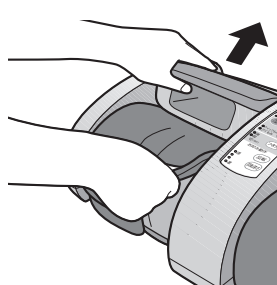

4 逆側も取り外す

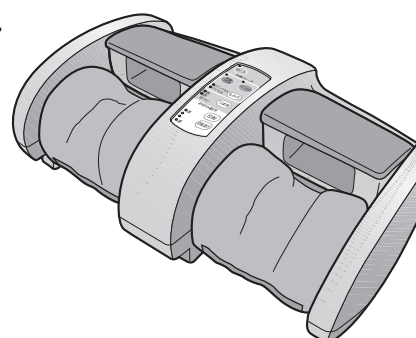

Q&A

Q.1

なぜ足がだるくなったり、重く感じたりするようになるのでしょうか？

A.1

血液は、心臓から動脈を通して身体中に送られ、静脈を通して心臓に戻ってきます。このとき足は身体の部位で最も心臓から遠い位置にあり、血液が届くのに時間がかかり、「だるい」「重い」といった症状が出やすくなると言われています。

Q.2

どの位の時間、使用すればいいの？

A.2

ご使用は1回15分以内に。長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、逆効果になることがありますのでご注意ください。

Q.3

1ヵ月の電気代はいくらですか？

A.3

1日30分(15分×2回)、毎日使用した場合で約4円/月です。
(新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算)

定格・仕様

販 売 名	フットサロン EP1510
使 用 電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	10W
類 別	機械器具77 バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
医 療 機 器 承 認 番 号	21900BZX01204000
タ イ マ ー	約15分
本 体 寸 法	幅598mm×奥行410mm×高さ216mm
質 量	約10.0kg
定 格 時 間	30分
製 造 販 売 元	パナソニック株式会社 東京都港区西新橋2-38-5 西新橋MFビル
製 造 元	北京松下電工有限公司 中華人民共和国北京市経済技術開発区同済北路1号

愛情点検

★長年ご使用のフットマッサージャーの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がある。
- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 本体が変形したり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

こんな異常を感じたら

症状

原因と処置

全てのランプが点滅して動作がとまった

異物がはさまったり、ご使用中無理な力を加えた場合、安全のため動作が止まる場合があります。そのときは電源プラグを抜き約10秒後に再度電源プラグを差し込み、電源を入れて操作してください。(P6～P7参照)

動かない

電源プラグが抜けていませんか
しっかり差し込んでください。(P6参照)

コードが断線していませんか

破損してしまった

点検後まだ異常があるだ

ただちに使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

動作中発生する音について

ご使用中に下記のような動作音がありますが、構造上発生するもので異常ではありません。

- 回転方向が切り替わるときの音（カチッ音）
- 回転している音（シュルシュル音）
- 本体布カバー・着脱カバーのこすれる音（ギュッ音）
- つま先もみ中のエアが加圧する動作音（ブー音）
- つま先もみ中のエアが排気する音（シュー音、スー音）
- つま先部が動いた音（カタッ音）
- モーター音（ウォーン音、ウィーン音、スー音）

警告

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

定格・仕様
こんな異常を感じたら

15

16

メモ

メモ

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(16ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 フットサロン

●品 番 EP1510

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用	※補修用性能部品の保有期間	6年
部品代	部品および補助材料代	当社は、このフットサロンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。	
出張料	技術者を派遣する費用		

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
中部地区	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「 ご愛用者登録 」をしてください		
お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！		
<div>PC</div> http://club.panasonic.jp/		※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。
<div>携帯</div> http://mobile.club.panasonic.jp/		

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電 話	フリーダイヤル  0120-878-365	※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「540＃」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)		
■上記番号がご利用いただけない場合		■FAX フリーダイヤル  0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。		

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話	フリーダイヤル  0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2010

2012年1月1日作成（新様式第3版）
※2011年5月13日作成（新様式第2版）

B NO.7